



Slovgen s. r. o. , Diagnosztikai laboratórium, ILKOVIČOVA 8, 841 04 BRATISLAVA 4,
Slovak Republic, tel : 00421 905 550 916, Cég azonosító: 35700629, Adószám: SK2020906151, accounts:
SK551100000002626252786 (TATRSKBX); CZ885500000006107902001 (RZBCCZPP); Paypal FS5LN9AAC848S. A
Slovgen s.r.o. be van jegyezve a pozsonyi városbíróóság III. bíróságán, cégjegyzékszám 11939/B

MEGRENDELŐLAP

Betegségek detekciója DNS analízissel

MEGRENDELŐ

Keresztnév :
Utónév :
Lakcím :
.....
Tel. szám :

KUPONOK:

Cégnév :
Cég azonosító :
Adószám :
Székhely :
.....

ANALÍZIS: * 10 MUNKANAPON BELÜL *jelöljön X-el
 * KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

A Slovgen s.r.o. be van jegyezve a pozsonyi járás cégbíróságán, cégjegyzékszám 11939/B

No.	Faj (latin megnevezés)	Minta megjelölése	No. *	Analízis típusa		
				Analízis eredménye		
1				PBFD	Ch.psittaci	Avian polyomavirus
2				PBFD	Ch.psittaci	Avian polyomavirus
3				PBFD	Ch.psittaci	Avian polyomavirus
4				PBFD	Ch.psittaci	Avian polyomavirus
5				PBFD	Ch.psittaci	Avian polyomavirus

* ne töltse ki # húzza át a nem megfelelőt, a minta megjelölése (gyűrűszám, esetleg más) az oklevélben lesz feltüntetve,
Önálló oklevél – ingyenes, A5 formátumú oklevél minden mintára.

Mintavétel időpontja:
Minták labor érkezése:
Analízis elvégzésének
időpontja:

Fizetés módja :
átutalás, számlára való pénzbetét, csekk.
Eredmény elküldésének módja:

Postán, emailen

Dátum :

Megrendelő aláírása:

A megadott adatokat és az eredményeket az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Ez a megrendelőlap csakis a beküldött mintákra és a hozzájuk tartozó adatokra vonatkozik, amelyeket a megrendelő szolgáltatott a laboratóriumnak. A DNS analízis csakis az egyes betegségek meghatározására szolgál és nem használható az egyedek identitásának megállapítására.




Slovgen s. r. o. , Diagnosztikai laboratórium, ILKOVIČOVA 8, 841 04 BRATISLAVA 4, Slovak Republic, tel : 00421 905 550 916, Cég azonosító: 35700629, Adószám: SK2020906151, accounts: SK551100000002626252786 (TATRSKBX); CZ885500000006107902001 (RZBCCZPP); Paypal FS5LN9AAC848S. A Slovgen s.r.o. be van jegyezve a pozsonyi városbíróóság III. bíróságán, cégjegyzékszám 11939/B

FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS ÚTMUTATÓ A PBF-D-T OKOZÓ CIRKOVÍRUS ANALÍZISÉRŐL

A mintavételi kártyák helyes használata:

A mintavételi kártyák esetében, legyen az tiszta vagy már a levett vér után, ügyeljen a következő fontos részletekre:

- tartsa őket száraz, tiszta helyen, legjobb egy borítékban vagy zacskóban
- ne érjen hozzá a kártyán lévő itatóspapírhoz, sem akkor ha tiszta, sem akkor ha már levette a vérmintát, illetve a megszáradt vérhez sem
- vérvétel esetén mindig csak egy mintavételi kártyát készítsen elő, ezzel csökkentve a lehetséges aeroszolos vagy vírus részecskék általi kontaminációt
- **nagyon fontos: miután a vérminták megszáradtak ügyeljen arra, hogy az egyes kártyák egymástól elszeparálva legyenek**, minden kártyát helyezzen külön zacskóba vagy tasakba, gondoljon az elhelyezésükre is, ezzel minimalizálható a lehetősége annak, hogy a laborban kicsomagoláskor érintkezzenek
- a kártyákat elég papírral is elválasztani egymástól (lásd ábra)

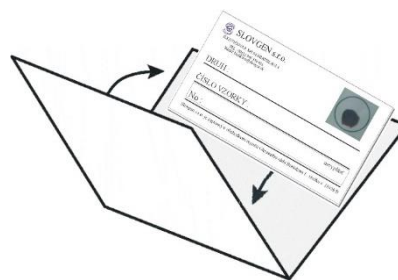

INFORMÁCIÓ AZ EREDMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN

Amennyiben az eredmény PBF-D vírus detekciója esetén pozitív a vírus jelenléte bizonyítva van a mintában. Viszont fontos észben tartani és átgondolni a következőket.

A vírus a légúti betegséget terjesztő vírusok csoportjába tartozik, tehát cseppfertőzéssel terjed. Ez azt jelenti, hogy a vírus részecske jelen van a levegőben, illetve a felületeken is. Ezért nagyon fontos, hogy a mintákat ne kontamináljuk mintavétel esetén.

Ideális ha nem veszünk le egymás után több mintát. A vírus könnyen átjuthat a beteg egyedekről a környezetbe és szennyezheti a tiszta kártyákat is. A helyiséget érdemes minden egyed után fertőtleníteni, átszellőztetni, esetleg UV lámpával fertőtleníteni. Ne feledjük, hogy a vírus jelen lehet a hálókön, amelyekkel a madarakat elfogják. Vérvétel esetén ajánlott megtisztítani a területet, akár etanollal is. Természetesen minden vérvétel után fontos a kézmosás.

Ez az analízis nagyon érzékeny. Nagyon kis mennyiségű vírust is képes kimutatni. Vagyis, az eredményt adó jel arányos a mintában kezdeti stádiumban lévő vírus mennyiségével. Az egyes eredmények ezért más-más intenzitású jelet adnak. Gyengébb jel esetén nagyon nehéz megállapítani, hogy az egyed szervezetében kis mennyiségű vírus van, mert a fertőzés még viszonylag friss, vagy az egyed küzd a vírussal szemben, esetleg mintavétel esetén kontaminált mintáról van szó (ez lehet egy másik minta általi szennyezés, vagy a környezet miatt is).

Fontos észben tartani, hogy ezzel a teszttel a vírus jelenlétét határozzuk meg, nem pedig a fertőzöttség arányát. A gyengébb jelet adó pozitív mintát értelemszerűen nem határozhatjuk meg negatívként.

Laboratóriumunk ezért megjegyzés formájában feltünteti a protokollban, ha ehhez hasonló gyengébb jelet adó mintáról van szó. Ilyen esetben erősen ajánlott az új analízis 2-3 héttel később és a madár izolálása erre az időszakra.